


Carrelli LUMED euro_cart 4045
EP-LU4003 monocromatico
EP-LU4006 bicolore



Versione bicolore con braccio portacavo e piano aggiuntivo (opzionali)



Braccio portacavo (opzionale)

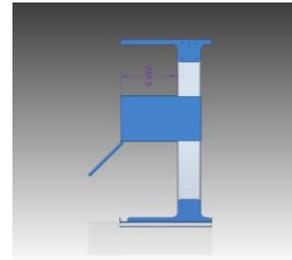

Vano portaoggetti (opzionale)

NOTA BENE: il prodotto potrebbe differire da quanto illustrato sopra

Descrizione

LUMED euro_cart 4045 è una linea di carrelli per apparecchiature e computer destinata ad ambulatori medici e strutture cliniche ospedaliere.

I carrelli sono realizzati in lamiera da 1,5 mm che garantisce robustezza e solidità.

È prevista una serie di accessori opzionali per diverse finalità. In particolare il braccio snodato non ha semplice funzione di reggicavo ma di portacavo a scomparsa interna grazie a coperchi richiudibili a scatto che ne consentono una facile estrazione.

Nella parte posteriore del pannello si trova un vano per gli accessori di impiego quotidiano (carta, elettrodi, gel) e per appoggiare le terminazioni del cavo paziente qualora si utilizzino elettrodi multiuso.

Sono verniciati con trattamenti idonei a renderli particolarmente resistenti al graffio e facili da pulire grazie all'assenza di spigoli morti inaccessibili. Sono dotati di 4 ruote di diametro 70 mm, 2 delle quali con freno. La stabilità è stata testata su piano inclinato fino a 12°.

I carrelli vengono forniti smontati (il kit di montaggio comprende gli attrezzi necessari e le istruzioni oltre a una guida filmata per il montaggio).

Caratteristiche Tecniche

CODICE: EP-LU4006

DESCRIZIONE: Carrello bicromatico grigio RAL 7035 per lo schienale e blu RAL 5012 per i piani (versione semplice composta da base, piano d'appoggio, pannello posteriore con vano)

DIMENSIONI: 40 x 45 cm (prof. x largh.) 90 cm (altezza totale dal suolo)

PESO: circa 15 Kg

PORTATA: 15 Kg (per ogni singolo piano); 40 Kg (massima complessiva)

ACCESSORI OPZIONALI:

- EP-LU4007 braccio snodato portacavo bicolore (corpo RAL 7035 coperchi RAL 5012)
- EP-LU4008 piano aggiuntivo (RAL 5012)
- EP-LU4009 vano portaoggetti con sportello (corpo RAL 7035 sportello RAL 5012)

- EP-LU4014 braccio snodato portasonda ultrasuoni (corpo RAL 7035 coperchi RAL 5012)

CODICE: EP-LU4003

DESCRIZIONE: Carrello monocromatico grigio chiaro RAL 7035 (versione semplice composta da base, piano d'appoggio, pannello posteriore con vano)

DIMENSIONI: 40 x 45 cm (prof. x largh.) 90 cm (altezza totale dal suolo)

PESO: circa 15 Kg

PORTATA: 15 Kg (per ogni singolo piano); 40 Kg (massima complessiva)

ACCESSORI OPZIONALI:

- EP-LU4002 braccio snodato portacavo (RAL 7035)
- EP-LU4004 piano aggiuntivo (RAL 7035)
- EP-LU4005 vano portaoggetti con sportello (RAL 7035)
- EP-LU4014 braccio snodato portasonda ultrasuoni (RAL 7035 coperchi RAL 5012)

Altre informazioni

Trattasi di Dispositivo Medico di Classe I secondo la direttiva 93/42/EEC e successive, in quanto destinato a trasportare altri Dispositivi Medici per i quali assolve funzione di appoggio e movimentazione in ambienti chiusi (al coperto).

Per la pulizia utilizzare un panno inumidito di una soluzione diluita di acqua e detersivo neutro per mani. Per l'igiene e la disinfezione si consiglia di utilizzare un disinfettante leggero e non aggressivo per apparecchiature destinate all'ambiente medico (ad esempio BACILLOL AF - Body Chemie Hamburg GmbH).

Il carrello non è amagnetico e pertanto non deve essere utilizzato in sale dove è in funzione un'apparecchiatura per la risonanza magnetica.

Utilizzare il carrello secondo le linee generali di sicurezza per i complementi d'arredo e le linee generali per la corretta prassi igienica in ambiente medico ospedaliero e ambulatoriale.

Il carrello soddisfa le direttive relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose (RoHS) CE2002/95/CE, CE2002/96/CE, CE2003/108/CE recepite in Italia da DLn. 151 del 25/07/2005.

CND V9099, N° di Iscrizione al Repertorio 1241013 /R