


EP-LU4006 Carrelli universali LUMED® euro_cart 4045
EP-LU5010 kit sistema per elettrodi a suzione euro_vacu

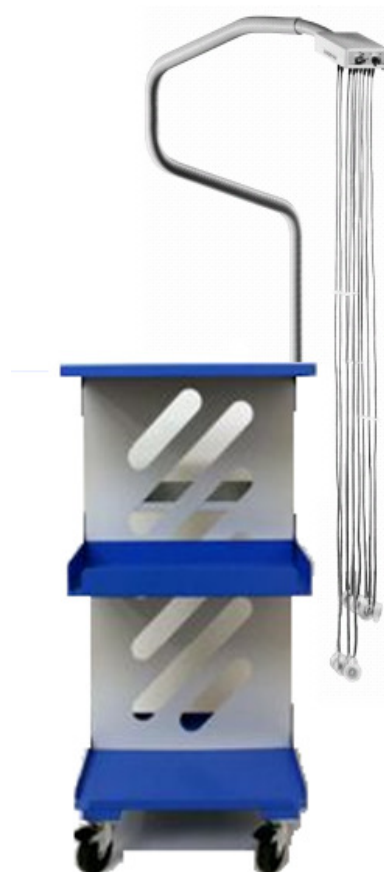

NOTA BENE: il prodotto potrebbe differire da quanto illustrato. Il produttore si riserva il diritto di modificare il prodotto senza darne preavviso.
Il piano intermedio è opzionale.

Descrizione

LUMED® euro_cart è una linea di carrelli per apparecchiature e computer destinata ad ambulatori medici e strutture cliniche ospedaliere, completo di cavo paziente a suzione, per ECG a riposo o sotto sforzo.

I carrelli sono realizzati in lamiera da 1,5 mm che garantisce robustezza e solidità.

È prevista una serie di accessori opzionali per diverse finalità.

Nella parte posteriore del pannello si trova un vano per gli accessori di impiego quotidiano (carta, elettrodi, gel) e per appoggiare le terminazioni del cavo paziente qualora si utilizzino elettrodi multiuso.

Sono verniciati con trattamenti idonei a renderli particolarmente resistenti al graffio e facili da pulire grazie all'assenza di spigoli morti inaccessibili. Sono dotati di 4 ruote di diametro 70 mm, 2 delle quali con freno. La stabilità è stata testata su piano inclinato fino a 12°.

I carrelli vengono forniti smontati (il kit di montaggio comprende gli attrezzi necessari e le istruzioni oltre a una guida filmata per il montaggio).

Caratteristiche Tecniche

CODICE: EP-LU4006

DESCRIZIONE: Carrello bicromatico grigio chiaro RAL 7035 e celeste intenso RAL 5012 (base, piano d'appoggio, vano posteriore)

DIMENSIONI: 40 x 45 cm (prof. x largh.) 90 cm (altezza totale dal suolo)

PESO: circa 15 Kg

PORTATA: 15 Kg (per ogni singolo piano); 40 Kg (massima complessiva)

CODICE: EP-LU4003

DESCRIZIONE: Carrello monocromatico grigio chiaro RAL 7035 semplice (base, piano d'appoggio e vano posteriore)

DIMENSIONI: 40 x 45 cm (prof. x largh.) 90 cm (altezza totale dal suolo)

PESO: circa 12 Kg

PORTATA: 15 Kg (per ogni singolo piano); 40 Kg (massima complessiva)

ACCESSORI OPZIONALI (per entrambi i modelli):

- braccio snodato portacavo
- braccio snodato portasonda
- piano aggiuntivo / vasca portaoggetti
- vano portaoggetti con sportello



Altre informazioni

Trattasi di complemento d'arredo. Non è un Dispositivo Medico secondo la direttiva 93/42/EEC e successive, in quanto non interagisce con il paziente soggetto di terapia o diagnosi medica e non è collegato (elettricamente) con Dispositivi Medici per i quali assolve solo funzione di appoggio e movimentazione in ambienti chiusi (al coperto).

Per la pulizia utilizzare un panno inumidito di una soluzione diluita di acqua e detersivo neutro per mani. Per l'igiene e la disinfezione si consiglia di utilizzare un disinfettante leggero e non aggressivo per apparecchiature destinate all'ambiente medico (ad esempio BACILLOL AF - Body Chemie Hamburg GmbH). Utilizzare il carrello secondo le linee generali di sicurezza per i complementi d'arredo e le linee generali per la corretta prassi igienica in ambiente medico ospedaliero e ambulatoriale.

Il carrello non è amagnetico e pertanto non deve essere utilizzato in sale dove è in funzione un'apparecchiatura per la risonanza magnetica.

Il carrello soddisfa le direttive relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose (RoHS) CE2002/95/CE, CE2002/96/CE, CE2003/108/CE recepite in Italia da DLn. 151 del 25/07/2005.