


# Registratore ABPM fino a 72 ore di registrazione con custo screen 300 e custo diagnostic



- ▶ Massimo comfort per il paziente, grazie alla sileziosità e al controllo automatico sulla pressione di gonfiaggio
- ▶ Estrema robustezza e massima precisione delle misure. Sensore indipendente dalla temperatura.
- ▶ Interfaccia estremamente semplice e intuitiva, con tabelle e confronto tra tutti gli esami del paziente
- ▶ Refertazione rapida con test predefiniti e personalizzati
- ▶ Attività "paperless": invio di dati e referti via rete, email, fax. Condivisione dei dati con sistemi esterni: .csv, pdf, immagine ...
- ▶ Versatile interfacciamento con le procedure HIS /SIA (SIO), tramite HL7, GDT, DICOM ...

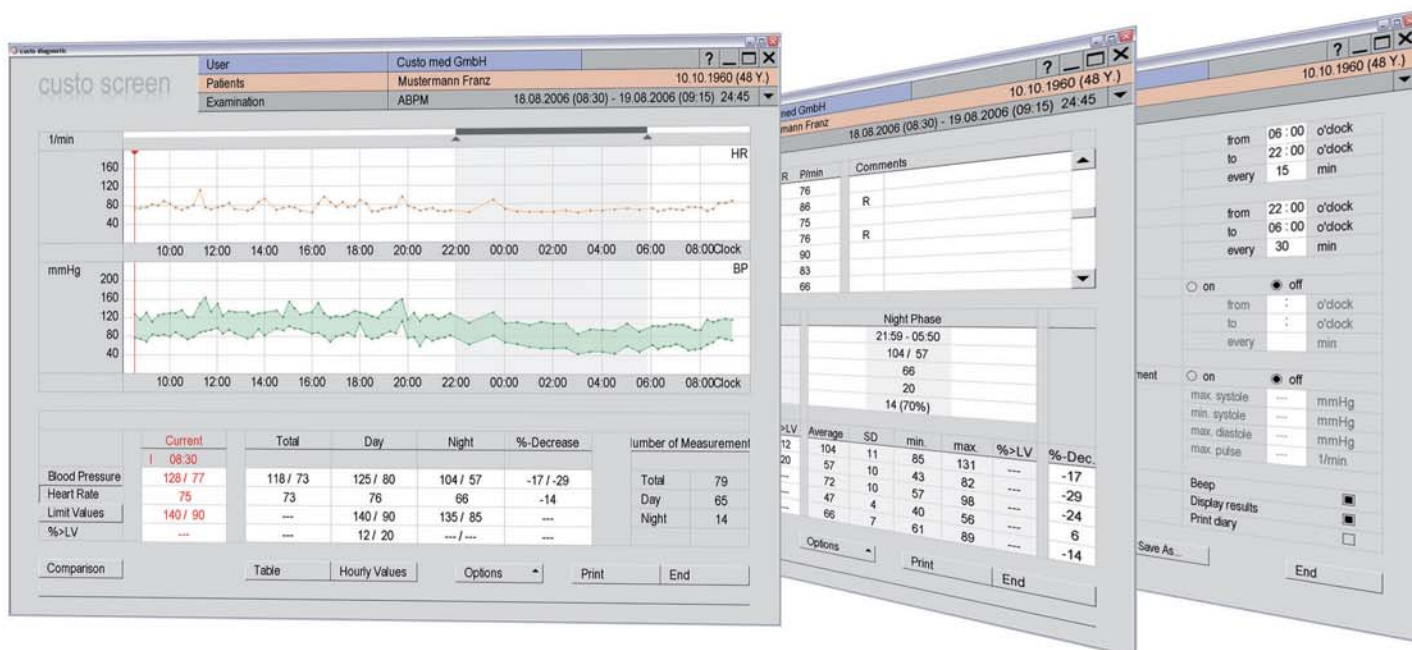

**72h**  
Recording

# Caratteristiche tecniche

## custo screen 300

Metodo	Oscillometrico, con regolazione automatica dello zero
Limiti di misura	Pulsazioni: 35 – 220 bpm Pressione arteriosa sistolica: 70 – 270 mmHg Pressione arteriosa diastolica: 40 – 155 mmHg
Pressione di gonfiaggio	<= 300 mmHg
Registrazione	fino a 512 misure in un periodo di 72 ore
Durata della misura	circa 30 s
<b>Silenziosità della misura</b>	<b>inferiore a 43dB (Laboratorio Mueller&amp;Sebastiani GmbH)</b>
Intervalli di misura	di giorno ogni 15 min., di notte ogni 30 min.; regolabili entrambi tra 5 e 90 min.; illimitati profili personalizzati, es. per attività o patologie specifiche, studi e ricerche ecc
Taglia dei bracciali	Pediatrico 20 – 24 cm Standard 24 – 32 cm XL 32 – 40 cm XXL (con o senza asola rigida) 38 – 50 cm
Trasferimento dati	Wireless (IrDA standard) via custo com USB (interfaccia infrarossi su porta USB)
Alimentazione	3x 1.5 Volt, Tipo AA 3x batterie ricaricabili, Ni-MH, 1.2 Volt, min. 1500 mAh
Dimensioni	circa 100* 66 * 26 mm (L * P * A)
Peso	circa 112 g (senza batterie)
Classificazione	Protezione classe III, Classe IIa, Tipo BF, EN 60601-1

### Dotazione standard:

\_ custo screen 300




\_ bracciale standard

\_ 3x AA 1,5 V

\_ custodia in neoprene

\_ cinta/ tracolla

Opzione: custo com USB

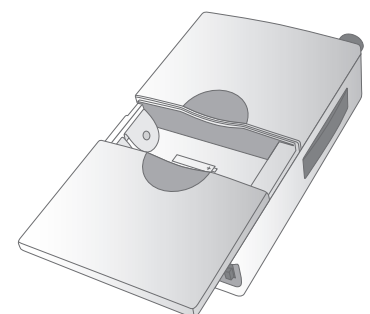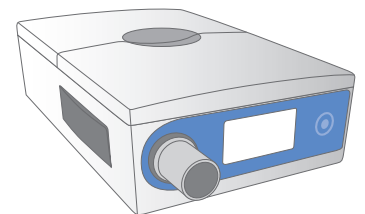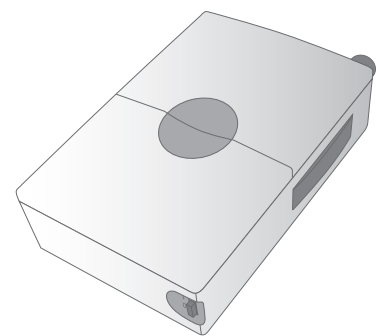

### Funzioni del software ABPM

- Trend grafici delle pressioni e delle pulsazioni, con soglie e durata giorno/notte
- Tabella delle misure e delle medie orarie
- Confronto tra TUTTI gli esami del paziente, oppure tra due a scelta
- Chiara evidenza delle misure oltre i limiti, sia nei trend che nelle tabelle

