




Holter di lunga durata e Telemonitoraggio Interattivo

# custo cloud cardiology

custo-med



# custo kybe center

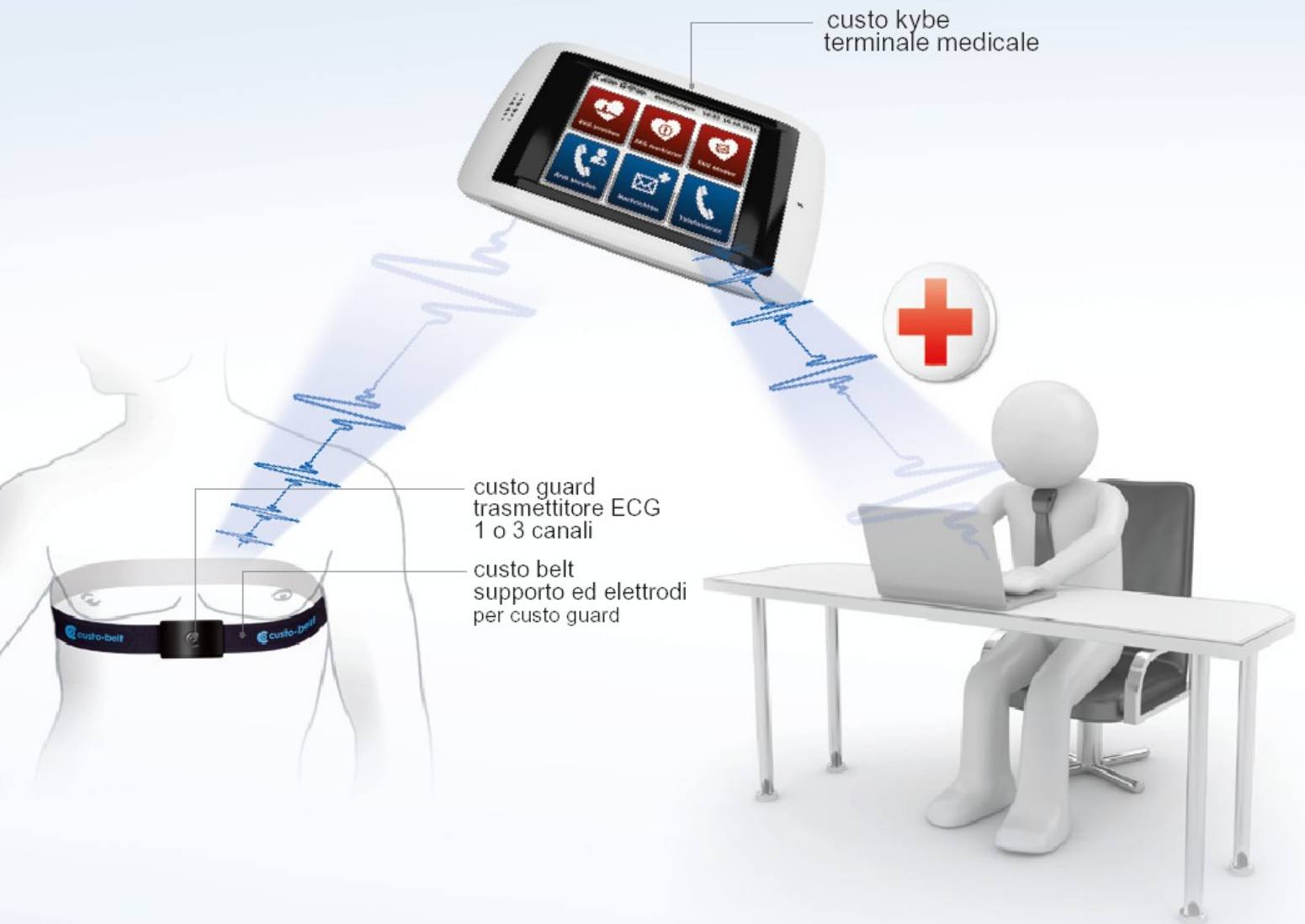

## Holter di Lunga Durata

Il sistema è composto dal terminale medicale *custo kybe*, dal trasmettitore *custo guard* e dalla fascia *custo belt*. Grazie al software *custo diagnostic tera*, il sistema viene programmato come un normale registratore Holter. Al termine della registrazione i dati vengono trasferiti rapidamente al computer, grazie alla connessione USB.

Niente di nuovo, dite? Invece no!

Guardate:

- durata fino a 6 mesi, in continuo
- assenza di elettrodi monouso
- assenza di cavo paziente

Nessuno può offrire di meglio ...

## Telemonitoraggio Interattivo

Il sistema è composto dal terminale medicale *custo kybe*, dal trasmettitore *custo guard* e dalla fascia *custo belt*. La centrale di monitoraggio *custo kybe center*, gestisce la programmazione del sistema e il monitoraggio dei pazienti.

Durante la registrazione il tracciato viene spedito alla centrale, automaticamente (da protocollo) oppure se viene marcato un evento.

La Centrale può interrogare il sistema, per eseguire uno streaming ECG in tempo reale, correggere la programmazione oppure inviare dei messaggi al paziente.

Il tracciato del monitoraggio può essere analizzato anche con il sistema Holter *custo diagnostic tera*!

Nessuno può offrire di meglio ...